

BELOTERO®

BIOMIMETIC BY DESIGN



INSPIRED BY NATURE. DESIGNED FOR YOU.

BELOTERO® – DE COLLECTIE BIOMIMETISCHE HYALURONZUURFILLERS DIE DE KENMERKEN EN BEWEGINGEN VAN JE HUID NABOOTST VOOR NATUURLIJKE RESULTATEN DIE MEEBEWEGEN EN AANVOELEN ALS VAN JEZELF.^{1,4}

MERZ AESTHETICS®

A man and a woman are shown from the chest up, wearing white clothing. The man, on the left, has dark, wavy hair and a beard, looking slightly to the right. The woman, on the right, has long, wavy brown hair and is looking towards the left. They are both looking in the same direction, creating a sense of shared focus.

THE ART OF BIOMIMICRY

INSPIRED BY NATURE.
DESIGNED FOR YOU.

SCHOONHEID BEGINT MET NATUUR

IN HARMONIE MET JOUW UNIEKE KENMERKEN

De natuur vormt de blauwdruk voor schoonheid. Kijk hoe een waterdruppel zich naar zijn perfecte vorm voegt, een bloemblaadje zich ontvouwt of een golf zijn ritme vindt, en je ziet telkens hetzelfde principe: kenmerken en beweging die op natuurlijke wijze in harmonie zijn. Datzelfde principe ligt ten grondslag aan de architectuur van de menselijke huid.

Bij Merz Aesthetics® vormt dit idee de basis voor de ontwikkeling van BELOTERO®: een uitgebreide collectie biomimetische hyaluronzuurfillers voor resultaten die zijn afgestemd op individuele behoeften. BELOTERO® gaat verder dan het opvullen van rimpels of het toevoegen van volume. Het bootst de natuurlijke kenmerken en het gedrag van de huid na.¹

Door zich aan te passen aan de kenmerken van je huid, is BELOTERO® ontworpen om je unieke gelaatstrekken te respecteren en de natuurlijke harmonie te ondersteunen,⁴ voor resultaten die eruitzien, natuurlijk aanvoelen en met je meebewegen.



HEB JE WEL EENS VAN BIOMIMETISCHE INGREDIËNTEN GEHOORD?

Biomimetisch ontwerp is geïnspireerd op de natuur. De term is afgeleid van de Griekse woorden bios (leven) en mimesis (imitatie) en verwijst naar een ontwerpconcept dat de kenmerken, functies en het gedrag van natuurlijke systemen nabootst.

Binnen de esthetische geneeskunde zijn biomimetische ingrediënten geïnspireerd op stoffen die van nature in de huid voorkomen. Ze zijn ontworpen om samen te werken met je huid, zich er naadloos in te integreren en een zachte, natuurlijke uitstraling te ondersteunen.

HYALURONZUUR: HET BIOMIMETISCHE INGREDIËNT

Hyaluronzuur (HA) wordt van nature door het lichaam aangemaakt en helpt de huid gehydrateerd en soepel te houden. Het kan grote hoeveelheden water binden en werkt daarmee als een natuurlijke vochtinbrenger voor het weefsel.

Vanaf een jaar of 25 neemt de natuurlijke aanmaak van hyaluronzuur in de huid geleidelijk af. Naarmate het hyaluronzuurgehalte daalt, wordt de huid droger en verliest deze aan elasticiteit. Dit kan leiden tot fijne lijntjes, rimpels en het vervagen van gezichtscontouren.

De esthetische geneeskunde biedt verschillende oplossingen om deze veranderingen aan te pakken. Hyaluronzuurfillers kennen een breed scala aan toepassingen, van het verzachten van lijntjes en het accentueren van de lippen tot het ondersteunen van de gezichtscontouren en het verbeteren van de huiduitstraling.



BELOTERO®: ONTWIKKELD OM SAMEN TE WERKEN MET JE HUID – NIET ERTEGENIN

BELOTERO® is de eerste en enige collectie hyaluronzuurfillers met de unieke CPM®-technologie (Cohesive Polydensified Matrix), ontwikkeld om een frisse, natuurlijke uitstraling te helpen bereiken, met respect voor je individuele gelaatstreken.^{1,3} Geïnspireerd door het principe van biomimicry zijn BELOTERO®-fillers ontwikkeld om de natuurlijke kenmerken en bewegingen van je huid na te bootsen.³ Dankzij deze unieke benadering kan het product zich gelijkmatig in het weefsel integreren, met respect voor de dynamiek en expressie van je gezicht.⁴ Voor natuurlijk ogende, harmonieuze resultaten die je uitstraling versterken zonder te veranderen wat je uniek maakt. Zodat mensen jou zien, en niet jouw behandeling.

WAT BETEKENT “NATUURLIJK OGENDE RESULTATEN” EIGENLIJK?

“NATUURLIJK OGENDE RESULTATEN” WORDEN VAAK BELOEFD, MAAR ZIJN NIET EENDUIDIG GEDEFINIEERD. HET ONDERSTAAND KADER INTRODUCEERT VIER BELANGRIJKE PIJLERS AAN DE HAND WAARVAN KAN WORDEN BEOORDEELD HOE BIOMIMETISCHE FILLERS NATUURLIJK OGENDE RESULTATEN KUNNEN BEREIKEN.⁴ BELOTERO® IS ONTWERPEN MET DEZE PRINCIPES ALS UITGANGSPUNT.



ZIEN

Een frisse uitstraling die jouw eigenheid respecteert.

VOELEN

De behandelde huid of lippen voelen glad aan, vergelijkbaar met niet-behandelde gebieden.

ERVAREN


Gelaatstreken die eruitzien en aanvoelen als van jezelf.

UITDRUKKEN

Gezichtsuitdrukkingen voelen natuurlijk en authentiek aan.

JOUW GEZICHT.
JOUW MOGELIJKHEDEN.



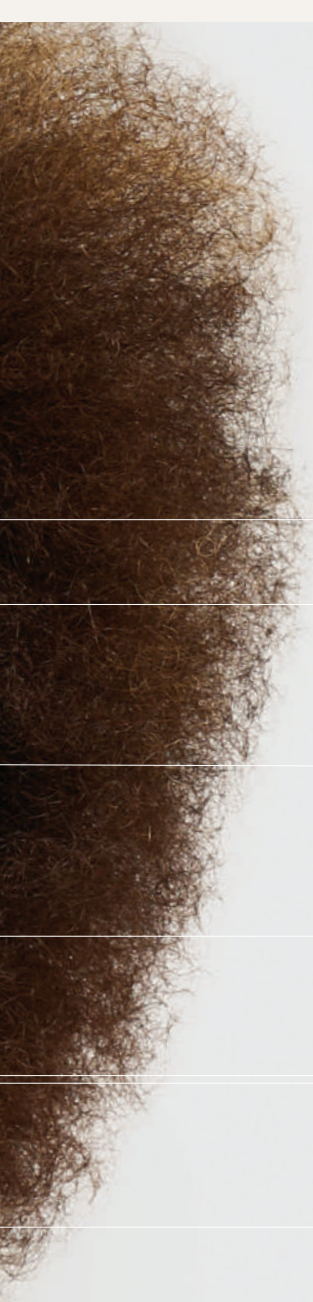

BELOTERO® BIEDT EEN BREED SCALA AAN BEHANDELINGEN, AFGESTEMD OP JOUW WENSEN EN BEHOEFTE⁵⁻¹⁰

VERFIJNEN:

Geschikt voor het verzachten van verschillende soorten lijntjes, van het voorhoofd tot het gebied onder de ogen, voor een subtiele en gebalanceerde verfrissing van het gezicht.⁵

- **VOLUME HERSTELLEN:**

Ontwikkeld om het volume te herstellen en bij te dragen aan een gebalanceerde gezichtscontour.⁸

- **HUID VERBETEREN:**

Ontwikkeld om de hydratatie en uitstraling van de huid ter hoogte van de wangen te verbeteren, voor een gezonde, stralende look.^{9,11}

- **VERZACHTEN:**

Ontwikkeld om fijne lijntjes en fijne rimpels te verzachten, bijvoorbeeld rond de mond, voor een frisse uitstraling.⁶

- **MODELLEREN:**

Ontwikkeld om de gezichtscontouren meer definitie te geven en bij te dragen aan een gebalanceerde uitstraling.⁷

- **LIPPEN VERBETEREN:**

Geschikt voor het definiëren en verbeteren van de lipcontour, voor volle en harmonieuze lippen.^{5,7}

DE BELOTERO®-COLLECTIE BIOMIMETIC BY DESIGN

ONS PRODUCTPORTFOLIO



De BELOTERO®-collectie is een biomimetische collectie hyaluronzuurfillers, ontwikkeld om de natuurlijke kenmerken en bewegingen van de huid na te bootsen.¹ De collectie is ontwikkeld om in harmonie met je huid te werken, voor resultaten die natuurlijk ogen, aanvoelen en met je meebewegen.

BLIJF TROUW AAN JEZELF BIJ IEDERE LACH

ELK GEZICHT IS UNIEK, EN DAT GELDT OOK VOOR ELKE BEHANDELING MET **BELOTERO®**.

- **Unieke technologie die de natuurlijke eigenschappen van de huid nabootst:**
Ontwikkeld met de gepatenteerde CPM®-technologie, die een naadloze integratie van het product in de huid en harmonieuze resultaten mogelijk maakt.^{1,3}
- **Resultaten op maat:**
Een breed scala aan behandelingsmogelijkheden voor oplossingen die zijn afgestemd op jouw wensen en behoeften.¹⁰
- **Meer dan 20 jaar klinische ervaring:**
Al meer dan twee decennia wereldwijd toegepast, ondersteund door meer dan 150 wetenschappelijke publicaties.¹²
- **Een betrouwbaar profiel op het gebied van kwaliteit en veiligheid:**
Een goed gedocumenteerd en betrouwbaar veiligheidsprofiel, ondersteund door een hoge mate van tevredenheid onder patiënten en professionals.^{13,15}

VEELZIJDIGE OPLOSSINGEN VOOR EEN HARMONIEUZE EN VERFIJNDE UITSTRALING

**MINDER FIJNE LIJNTJES
EN RIMPELS⁵**

**HERSTELD VOLUME
TER HOOGTE VAN DE
SLAAP EN WANGEN⁸**

**EEN GLADDER OGENDE
HUID ONDER DE OGEN⁵**

**EEN FRISSE,
GEHYDRATEERDE HUID
TER HOOGTE VAN DE WANGEN⁹**

**MINDER ZICHTBARE
NASOLABIALE PLOOIEN
EN MARIONETLIJNTJES^{5,7}**

**GLADDERE FIJNE
LIJNTJES RONDOM
DE MOND^{5,6}**

**VOLLERE,
HARMONIEUZE LIPPEN^{5,7}**

**OPNIEUW GEDEFINIEERDE
GELAATSTREKKEN
TER HOOGTE VAN DE KIN⁸**

DE BELOTERO®-COLLECTIE

— BELOTERO® BALANCE

— BELOTERO® INTENSE

— BELOTERO® SOFT

— BELOTERO® VOLUME

— BELOTERO® REVIVE

BELOTERO® BALANCE



DE VERFIJNER VOOR MATIGE RIMPELS, EEN NATUURLIJK OGEGENDE HUIDVERJONGING EN LIPVERBETERING⁵

Als onderdeel van onze biomimetische collectie is BELOTERO® Balance een veelzijdige filler voor het verzachten van zichtbare tekenen van huidveroudering, met behoud van uw natuurlijke gezichtsuitdrukkingen.^{1,4}

BELOTERO® Balance is geschikt voor de behandeling van verschillende gebieden, waaronder nasolabiale plooien, marionetlijntjes, horizontale voorhoofdsrimpels, het gebied onder de ogen, periorale lijntjes, mondhoeken en voor lipverbetering.⁵ BELOTERO® is ontwikkeld om zich op een gebalanceerde wijze in de huid te integreren, voor een frisse en natuurlijk ogende uitstraling.^{1,13}

MEER DAN **93%**
PATIËNTTEVREDENHEID¹⁶

DIRECT ZICHTBARE EN
LANGDURIGE* RESULTATEN,
TOT
18 MAANDEN^{5*}

*Resultaten houden bij de meeste patiënten 6 tot 18 maanden aan, afhankelijk van het behandelde gebied.



RESULTATEN DIE VOOR ZICHZELF SPREKEN

VOOR



De patiënt wilde het gebied onder de ogen verfrissen, de nasolabiale plooien behandelen en de lippen subtiel accentueren.

NA



De patiënt werd behandeld met 2 ml BELOTERO® Balance (traangoot, 0,4 ml per zijde; nasolabiale plooï, 0,4 ml per zijde; lippen, 0,4 ml in de vermilionrand). De weergegeven resultaten zijn 14 dagen na de behandeling vastgelegd.

BELOTERO® BALANCE

VOOR



De patiënt wilde haar uitstraling verfrissen en haar nasolabiale plooïen verzachten.

NA



De patiënt werd behandeld met 1,0 ml BELOTERO® Balance (0,6 ml in het rechter nasolabiale/periorale gebied en 0,4 ml in het linker nasolabiale/periorale gebied). De weergegeven resultaten zijn 14 dagen na de behandeling vastgelegd.

BELOTERO® INTENSE



DE **VORMGEVER** VOOR GEZICHTSONDERSTEUNING, GELAATSCONTOUREN EN LIPVOLUME

BELOTERO® Intense is ontwikkeld om de gezichtscontouren te ondersteunen en te definiëren. Het is ontwikkeld om diepere lijntjes te verzachten en de gezichtscontouren en diepere lijntjes zichtbaar, maar natuurlijk ogend te verbeteren.¹³

BELOTERO® Intense is geïndiceerd voor de behandeling van nasolabiale plooien en marionetlijntjes en voor het vergroten van het lipvolume.⁷ Deze filler is ontwikkeld voor langdurige* liftende effecten en een hoge patiënttevredenheid,¹³ ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en onze unieke biomimetische technologie.¹

MEER DAN **93%**
PATIËNTTEVREDENHEID¹⁶

NATUURLIJK OGENDE
RESULTATEN DIE


TOT **12 MAANDEN**
AANHOUDEN^{7*}

*Bij de meeste patiënten houden de resultaten 3 tot 12 maanden aan, afhankelijk van de behandelde indicatie.




RESULTATEN DIE VOOR ZICHZELF SPREKEN

VOOR

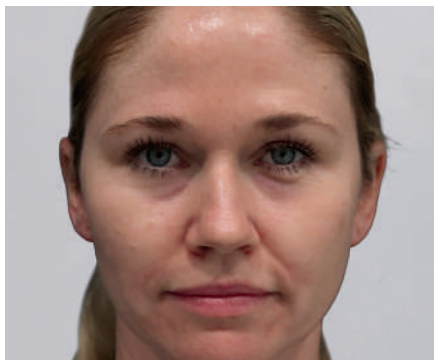

De patiënt wilde specifiek haar nasolabiale plooien en marionetlijntjes behandelen.

NA

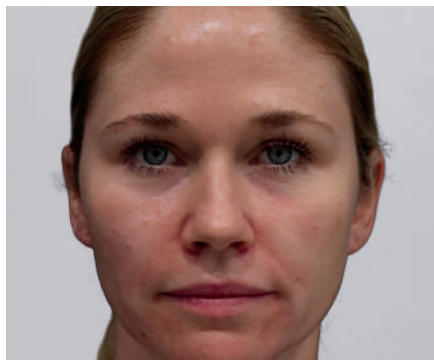

De patiënt werd behandeld met BELOTERO® Intense (0,4 ml in de rechter nasolabiale plooï, 0,6 ml in de linker nasolabiale plooï, 0,3 ml in de rechter marionetlijntjes en 0,6 ml in de linker marionetlijntjes). De weergegeven resultaten zijn 14 dagen na de behandeling vastgelegd.

BELOTERO® INTENSE

BELOTERO® SOFT



DE VERZACHTER VOOR FIJNE LIJNTJES IN DELICATE GEBIEDEN

Rond de leeftijd van 25 jaar begint het natuurlijke verouderingsproces van de huid en kunnen de eerste fijne lijntjes zichtbaar worden. BELOTERO® Soft is speciaal ontwikkeld om deze eerste tekenen van huidveroudering te behandelen en is geschikt voor delicate gebieden, zoals het periorale gebied.⁶

Deze behandeling is ontwikkeld om naadloos in de huid te integreren¹ en zo natuurlijk ogende resultaten mogelijk te maken,¹³ met respect voor je natuurlijke gelaatstreken en gezichtsuitdrukkingen.⁴

HOGE
PATIËNTTEVREDENHEID¹³

RESULTATEN DIE
TOT **6** MAANDEN
AANHOUDEN⁶



BELOTERO® VOLUME



DE VOLUMEHERSTELLER VOOR MEER GEDEFINIEERDE GELAATSTREKKEN

Dankzij de biomimetische benadering is BELOTERO® Volume ontwikkeld om harmonieus in de huid te integreren¹ en het volume ter hoogte van de wangen, slapen en kin te herstellen, en diepe nasolabiale plooien te verzachten.⁸ Voor verfijnde, natuurlijk ogende resultaten.¹⁴



MEER DAN **94%**
VAN DE PATIËNTEN WAS
TEVREDEN OVER HET
RESULTAAT¹⁷

DIRECTE EN LANGDURIGE
EFFECTEN:*

TOT **18** MAANDEN^{8*}

*Bij de meeste patiënten houden de resultaten 6 tot 18 maanden aan, afhankelijk van het behandelde gebied.



RESULTATEN DIE VOOR ZICHZELF SPREKEN

VOOR



De patiënt ervaart verlies van volume ter hoogte van de wangen en de kin.

NA



De patiënt werd behandeld met 1 ml BELOTERO® Volume per zijde ter hoogte van de wangen en met 1,6 ml BELOTERO® Volume ter hoogte van de kin. De foto na de behandeling is 21 dagen na de behandeling gemaakt.

BELOTERO® VOLUME

VOOR



De patiënt wilde het volume van zijn kin vergroten.

NA



De patiënt werd behandeld met 3 ml BELOTERO® Volume ter hoogte van de kin. De foto na de behandeling is 21 dagen na de behandeling gemaakt.

BELOTERO® REVIVE



DE BOOSTER VOOR EEN STRLENDE, GEHYDRATEERDE HUID

Onze skinbooster BELOTERO® Revive, op basis van een combinatie van hyaluronzuur en glycerol, helpt het vochtgehalte van de huid aan te vullen en de huidkwaliteit ter hoogte van de wangen te verbeteren.⁹ Het product kan de teint en stevigheid van de huid verbeteren en tegelijkertijd de zichtbaarheid van fijne lijntjes, roodheid, ruwe plekkjes en zichtbare tekenen van zonnenschade verminderen.⁹ De behandeling draagt bij aan een frisse uitstraling van de huid ter hoogte van de wangen, met een gezonde uitstraling.^{9,11}

HOGE
PATIËNTTEVREDENHEID¹⁵

MEER DAN **90%**
VAN DE PATIËNTEN
ZOU DE BEHANDELING
AANBEVELEN¹⁵

MET ZICHTBARE
EFFECTEN
DIE TOT **9 MAANDEN**
AANHOUDEN^{9,15*}

100% VAN DE PATIËNTEN
LIETEN VERBETERDE
ESTHETISCHE RESULTATEN
ZIEN⁹



RESULTATEN DIE VOOR ZICHZELF SPREKEN

VOOR



De patiënt had last van roodheid van de huid, een ongelijkmatige teint en een verminderde hydratatie van de huid.

NA



De patiënt werd behandeld met 1 ml BELOTERO® Revive per zijde ter hoogte van de wangen, driemaal met tussenpozen van 4 weken. De foto na de behandeling is 6 maanden na de eerste behandeling gemaakt.

BELOTERO® REVIVE

VERSCHILLENDE ESTHETISCHE DOELEN –

VOOR



De patiënt wilde het volume ter hoogte van de jukbeenderen herstellen, haar nasolabiale plooien verzachten en haar lippen accentueren voor een meer gebalanceerde en frisse uitstraling.

NA*



De patiënt werd behandeld met 0,4 ml BELOTERO® Intense (0,2 ml per nasolabiale plooï), 2 ml BELOTERO® Volume (bovenste deel van de wangen, 1 ml per zijde), 1 ml BELOTERO® Revive (0,5 ml per wang, per zijde), 0,6 ml BELOTERO® Balance op de lippen en 0,6 ml BELOTERO® Intense in de lippen.

VOOR



De patiënt wilde verschillende aspecten aanpakken: een frisse, minder vermoeide uitstraling, meer definitie van de wangen, het verzachten van de nasolabiale plooien en het accentueren van de lippen.

NA*



De patiënt werd behandeld met 1 ml BELOTERO® Balance (traangoot, 0,5 ml per zijde), 1 ml BELOTERO® Intense (nasolabiale plooï, 0,2 ml per zijde; vermillionrand, 0,3 ml), 3 ml BELOTERO® Volume (wangen, 1,5 ml per zijde) en 0,6 ml BELOTERO® Balance in de lippen.

GEPERSONALISEERDE BEHANDELPLANNEN

VOOR



De patiënt wilde het volume van haar gezicht herstellen, met name ter hoogte van de wangen, kin en slapen. Daarnaast wilde zij het gebied onder de ogen verfrissen en haar lippen accentueren.


NA*



De patiënt werd behandeld met 1,5 ml BELOTERO® Balance per zijde in het gebied onder de ogen, de marionetlijntjes en de lippen, en met 3,5 ml BELOTERO® Volume per zijde ter hoogte van de wangen, kin en slapen.


VOOR/NA

VOOR

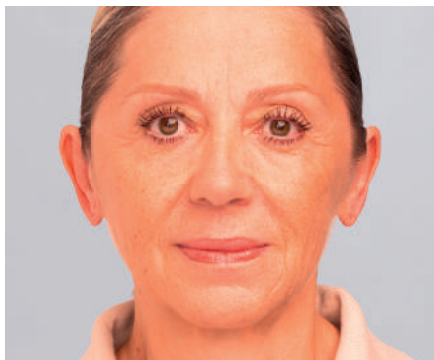

De patiënt wilde het volumeverlies ter hoogte van de wangen en nasolabiale plooien aanpakken en het volume van haar lippen vergroten.

NA*

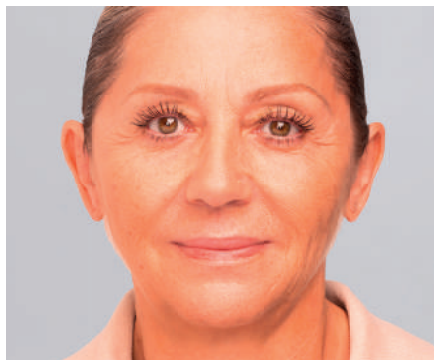

De patiënt werd behandeld met 1 ml BELOTERO® Balance in de lippen, 0,5 ml BELOTERO® Intense per zijde in de nasolabiale plooien en 2,5 ml BELOTERO® Volume per zijde ter hoogte van de wangen.

*De foto na de behandeling is 14 dagen na de behandeling gemaakt.

Er zijn geen retouches aan de afbeeldingen uitgevoerd. Individuele resultaten kunnen variëren. Raadpleeg uw zorgprofessional voor een behandelplan dat is afgestemd op uw wensen en behoeften.

WAAROM KIEZEN VOOR BELOTERO®?

BEWEZEN VEILIGHEIDSPROFIEL EN WERKING, ONDERSTEUND DOOR
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

20+ JAAR

WETENSCHAPPELIJKE EN KLINISCHE ERVARING,
MET EEN GOED ONDERBOUWD EN
BEWEZEN VEILIGHEIDSPROFIEL^{11,13,14}

150+

PUBLICATIES
SINDS 2005¹⁸

15+

INTERNATIONALE AWARDS¹⁸

VERKRIJGBAAR IN
90+ LANDEN

21+ MILJOEN

SPIUTEN WERELDWIJD
VERZONDEN¹²

HOGE PATIËNTTEVREDENHEID
BINNEN DE VOLLEDIGE
BELOTERO®-COLLECTIE^{13,15}

LANGDURIGE RESULTATEN TOT*

18 MAANDEN⁵⁻⁹

BELOTERO® IS DE EERSTE EN ENIGE COLLECTIE BIOMIMETISCHE
HYALURONZUURFILLERS, ONTWIKKELD MET UNIEKE CPM®-TECHNOLOGIE
DIE DE NATUURLIJKE KENMERKEN EN BEWEGINGEN VAN DE HUID NA-
BOOST, VOOR VOORSPELBARE, HARMONIEUZE EN
NATUURLIJK OGENDE RESULTATEN.^{1,3,11,13}

*Bij de meeste patiënten houden de resultaten 3 tot 18 maanden aan, afhankelijk van het behandelde gebied en het gebruikte BELOTERO®-product.



BEHANDELING, VEILIGHEIDSPROFIEL, RESULTATEN: JOUW BELANGRIJKSTE VRAGEN BEANTWOORD

HOE WERKT BELOTERO®?

BELOTERO® wordt door je esthetisch arts of behandelaar in verschillende huidlagen geïnjecteerd, afhankelijk van je behandelplan. Dankzij het unieke biomimetische gedrag, dat wordt ondersteund door de Cohesive Polydensified Matrix (CPM®)-technologie, is BELOTERO® ontwikkeld om de natuurlijke kenmerken van je huid na te bootsen. Hierdoor kan het product harmonieus in de huid integreren en zich aan de huid aanpassen, voor natuurlijk ogende resultaten die met je meebewegen.¹ De BELOTERO®-collectie biedt een breed scala aan behandelingen die aansluiten bij jouw individuele wensen, van het verbeteren van de huidkwaliteit en hydratatie tot het verminderen van rimpels en het herstellen van verloren volume.^{5,9}

HOE VERLOOPT EEN BELOTERO®-BEHANDELING?

Voorafgaand aan iedere behandeling bespreekt je esthetisch arts of behandelaar tijdens een consultatie je wensen en verwachtingen. Vervolgens wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld en aan je toegelicht, afgestemd op jouw wensen. Zodra je een beslissing hebt genomen, kan de behandeling beginnen. Jouw esthetisch arts of behandelaar injecteert de geschikte BELOTERO®-producten rechtstreeks in de huid van het te behandelen gebied.

IS EEN BELOTERO®-BEHANDELING PIJNLIJK?

Een behandeling met BELOTERO®-producten gaat over het algemeen gepaard met minimale belasting en pijn. Met uitzondering van BELOTERO® Revive bevatten alle producten binnen de collectie lidocaïne voor een comfortabelere behandeling. Daarnaast kan lokale anesthesie worden toegepast.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET BIOMIMETISCHE ONTWERP VAN BELOTERO®?

Wanneer BELOTERO® op de juiste manier wordt geïnjecteerd, bootst het de kenmerken en het gedrag van de huid na. Dit draagt bij aan:

- Natuurlijk ogende resultaten^{11,13}
- Een harmonieuze integratie in de huid¹
- Een werking die kan worden afgestemd op uiteenlopende behoeften van patiënten, van verbetering van de huidkwaliteit en hydratatie tot het herstellen van volume.^{5,9}
- Langdurige resultaten*

*Bij de meeste patiënten houden de resultaten 3 tot 18 maanden aan, afhankelijk van het behandelde gebied en het gebruikte BELOTERO®-product.

KUNNEN ANDEREN ZIEN DAT IK EEN BEHANDELING HEB GEHAD?

BELOTERO® zorgt voor natuurlijk ogende resultaten^{11,13} en een hoge patiënttevredenheid.^{13,15} Je blijft eruitzien als jezelf, maar met een frisse uitstraling en meer harmonie, afhankelijk van de gekozen behandeling, je persoonlijke voorkeuren en het gewenste resultaat.

ZIE IK ER OVERVULD OF OPGEZWOLLEN UIT?

Dankzij de unieke biomimetische CPM®-technologie integreert BELOTERO® zich bij een juiste injectietechniek naadloos in de huid en de verschillende weefselagen en past het zich hieraan aan. Zo worden je natuurlijke gezichtsuitdrukkingen gerespecteerd, zodat mensen jou zien en niet jouw filler.¹

ZIJN DE EFFECTEN DIRECT ZICHTBAAR?

Ja, kort na de behandeling zijn al resultaten zichtbaar. Deze zullen zich in de daaropvolgende dagen verder stabiliseren.

HOE LANG HOUDEN DE EFFECTEN VAN EEN BELOTERO®-BEHANDELING AAN?

Hoewel de resultaten van een BELOTERO®-behandeling langdurig zijn en bij sommige indicaties tot 18 maanden kunnen aanhouden,^{5,9} zijn ze niet permanent. Het lichaam breekt de hyaluronzuurgel na verloop van tijd op natuurlijke wijze af. De exacte duur is afhankelijk van het behandelde gebied en het gebruikte BELOTERO®-product. Om de resultaten te behouden, moet de behandeling worden herhaald volgens het advies van je esthetisch arts of behandelaar.

IS BELOTERO® VEILIG?

De BELOTERO®-collectie heeft een goed onderbouwd en bewezen veiligheidsprofiel.^{11,13,14} Een injectie kan leiden tot een minimale bloeding en tijdelijke zwelling. Bespreek eventuele bestaande medische aandoeningen of overgevoeligheden met je esthetisch arts of behandelaar. Deze kan je informeren over mogelijke reacties en bijwerkingen.

VIND EEN ESTHETISCH ARTS OF
BEHANDELAAR BIJ JOU IN DE BUURT VIA
MERZAESTHETICS.NL/KLINIEKZOEKER/

Het portfolio van Merz Aesthetics®

Als marktleider beschikt Merz Aesthetics® over een uniek en holistisch portfolio, ontwikkeld om patiënten te helpen zich op hun best te voelen.

Ultherapy

P R I M E

Speciaal ontworpen om de huid van het gezicht te liften en te verstrakken† en voor een stevigere, strakkere huid op het lichaam te zorgen.* Ultherapy PRIME® is de eerste niet-invasieve technologie die gebruikmaakt van microgerichte ultrasone technologie en geïntegreerde realtime beeldvorming om langdurige†† resultaten te bieden, afgestemd‡ op de unieke anatomie van elke patiënt.¹⁻⁴ Eén behandeling, geen hersteltijd. Geschikt voor alle huidtinten.¹

RADIESSE*

Een van de meest uitgebreid onderzochte regeneratieve biostimulatoren voor de huidkwaliteit. RADIESSE® maakt gebruik van innovatieve deeltjestechnologie die het regeneratieve potentieel van het lichaam activeert om huid te verstevigen en strakker te maken, en zichtbare tekenen van veroudering van binnenuit tegengaat.⁵

† 'Gezicht' verwijst naar de goedgekeurde indicaties voor Ultherapy PRIME®.

* Aangewezen voor het verbeteren van het uiterlijk van huidverslapping op de buik, de voorzijde van de armen en de achterzijde van de armen.

‡ „Personaliseren“ betekent het gebruik van realtime visualisatie

†† De resultaten van Ultherapy PRIME® kunnen tot 6 maanden aanhouden voor de armen en de buik en tot een jaar of langer in het gezicht†.

NEEM CONTACT OP MET UW BEHANDELEND ARTS
VOOR MEER INFORMATIE OVER HET
MERZ AESTHETICS PRODUCTPORTFOLIO.

BELOTERO®

BIOMIMETIC BY DESIGN

REFERENTIES

1. CASABONA G, ET AL. TISSUE-PLANE ADAPTABILITY OF HYALURONIC ACID GELS. DERMATOLOGIC SURGERY. 2026.
2. BORRELLI MR, MEHTA H. BIOMIMICRY – WHY IT MATTERS FOR DERMAL FILLERS. MODERN AESTHETICS. 2025;JUL/AUG.
3. ANTEIS - PATENT NOTE: WO 2005/085329 „BIOCOMPATIBLE CROSSLINKED GEL”.
4. SUWANCHINDA A, ET AL. J COSMET DERMATOL. 2026;25(3):E70784.
5. BELOTERO® BALANCE. INSTRUCTIONS FOR USE. 2026.
6. BELOTERO® SOFT. INSTRUCTIONS FOR USE. 2025.
7. BELOTERO® INTENSE. INSTRUCTIONS FOR USE. 2025.
8. BELOTERO® VOLUME. INSTRUCTIONS FOR USE. 2025.
9. BELOTERO® REVIVE, INSTRUCTIONS FOR USE. 2025.
10. VAN LOGHEM J ET AL. CLIN COSMET INVESTIG DERMATOL. 2021;14:1175–1199.
11. KERSCHER M, PRAGER W, FISCHER TC, ET AL. FACIAL S. PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY-GLOBAL OPEN. 2021; 9(12):E3973.
12. MERZ AESTHETICS. DATA ON FILES. 2026.
13. KÜHNE U, ESMANN J, VON HEIMBURG D, IMHOF M, WEISSENBERGER P, SATTLER G. SAFETY AND PERFORMANCE OF COHESIVE POLYDENSIFIED MATRIX HYALURONIC ACID FILLERS WITH LIDOCAINE IN THE CLINICAL SETTING - AN OPEN-LABEL, MULTICENTER STUDY, CLIN COSMET INVESTIG DERMATOL. 2016;9:373-81.
14. VANDEPUTTE J.J CLIN AESTHET DERMATOL. 2018 DEC;11(12):30-39.
15. HERTZ-KLEPTOW D, HANSCHMANN A, HOFMANN M, ET AL. FACIAL SKIN REVITALIZATION WITH CPM-HA20G: AN EFFECTIVE AND SAFE EARLY INTERVENTION TREATMENT. CLIN COSMET INVESTIG DERMATOL. 2019A;12:563-72.
16. FISCHER TC, SATTLER G, GAUGLITZ GG. FACIAL PLAST SURG. 2016;32(3):283-8.
17. GAUGLITZ G, ET AL. CLIN COSMET INVESTIG DERMATOL. 2017;10:507–513.
18. MERZ AESTHETICS. DATA ON FILES. 2025.
19. ULTHERA® INSTRUCTIONS FOR USE.
20. FABI SG ET AL., J DRUGS DERMATOL. 2019;18(5):426-432.
21. VACHIRAMON V ET AL., LASERS SURG MED. 2020;52(10):825-832. DOI:10.1002/LSM.23234
22. WERSCHLER WP ET AL., J CLIN AESTHET DERMATOL.2016;9(2):27-33
23. KIM J ET AL., CLIN. COSMET. INVESTIG. DERMATOL. 2019; 12, 771-784